

Chi siamo

COOPERATIVA SOCIALE QUID ONLUS

con sede a Verona -130 dipendenti specializzata nella produzione e vendita di abbigliamento e accessori.


In seguito all'emergenza Covid-19, Quid riconverte la produzione per realizzare mascherine in tessuto, implementando il coordinamento di una decina di altre cooperative e realtà produttive appartenenti al sistema LEGACOOOP

COOPERATIVA SOCIALE NONCELLO

con sede a Roveredo in Piano (PN) – storica cooperativa sociale di inserimento lavorativo dal 1981 gestisce servizi e sviluppa progetti al fine di creare opportunità per l'integrazione socio lavorativa di persone vulnerabili. Noncello aderisce al **Progetto Quid** aprendo una propria sartoria artigianale per la produzione di mascherine in tessuto.

Noncello sta anche commercializzando in accordo con Quid le mascherine, immaginando un modello di sviluppo dell'*economia sociale* promuovendo la cooperazione tra imprese.


Quindi una crescita condivisa – articolata in reti produttive - per lo sviluppo di economia sociale

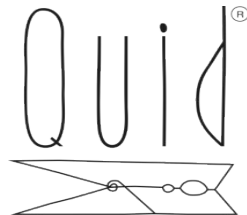

Il prodotto

Mascherina facciale ad uso **medico**
a 1 strato, **Tipo I**, in cotone con elastici,
lavabile fino a 15 volte.

**Approvata
dall'Istituto Superiore di Sanità.**
Il tessuto ha un **trattamento
antimicrobico e anti-goccia.**

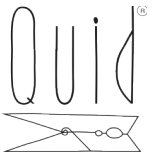

Prodotto conforme UNI EN 14683 e UNI EN ISO 10993

Le mascherine che rientrano nel **Tipo I** sono maschere facciali ad uso medico che dovrebbero essere utilizzate da pazienti e da altro personale per ridurre il rischio di diffusione dell'infezione in caso di epidemia e pandemia.

Si tratta di un dispositivo che copre la bocca e il naso, fornendo una barriera per ridurre al minimo la trasmissione diretta di agenti infettivi.

Le mascherine chirurgiche sono in regola con il parere ISS e sono equiparabili, nel periodo di emergenza, ad un DPI secondo quanto indicato dall'art 16. comma 1, del "Cura Italia".

Sono consigliate in questo periodo di emergenza per tutti (civili e lavoratori); sconsigliate nell'ambito delle attività sanitarie a contatto con pazienti infetti dove sono richiesti DPI facciali filtranti FFP2 e FFP3"



Istituto Superiore di Sanità

Gruppo di Lavoro "Dispositivi Medici COVID-19"

Prot. N. 13289/ON373/ON.12

COOPERATIVA SOCIALE QUID Onlus
Verona

Email pec: quidcoop@pec.it

Risposta al N. _____ del 14/04/2020


Allegati _____

OGGETTO: Valutazione maschere facciali ad uso medico; richiesta ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 – Proponente COOPERATIVA SOCIALE QUID Onlus
Rif. COV 657

Con riferimento all'istanza presentata ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 si trasmette l'allegata dichiarazione riportante parere **FAVOREVOLE ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE** del prodotto Maschera ad uso medico a 1 strato, in tessuto cotone, con elastici, lavabile, non sterile - Tipo I, per l'utilizzazione dello stesso secondo la destinazione d'uso prevista, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Rimane inteso che l'efficacia giuridica amministrativa della dichiarazione allegata è condizionata all'effettiva ed assoluta rispondenza del prodotto alla vigente normativa tecnica, certificata, con assunzione di unilaterale responsabilità, dal Proponente.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro
"Dispositivi Medici COVID-19"
(Dott.ssa Roberta Marcoaldi)

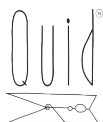


Caratteristiche

in singolo tessuto di cotone
con piccole pieghe laterali
rifinita con orlo
elastici laterali
nasello in alluminio
Forma rettangolare di misura finita L 170 mm x H 90 mm (+ 5 mm) con ampiezza centrale di apertura 170 mm (+ 5 mm)

Indicazioni di lavaggio:

Lavare per immersione in soluzione di 1 litro di acqua con 5 gr di ipoclorito di sodio (candeggina), sciacquare sotto acqua corrente, quindi lasciare asciugare completamente all'aria, per poi stirare a massima temperatura su ambo i lati il prodotto.
Lavare fino a 15 volte

Ogni mascherina è accompagnata da istruzioni per l'uso che spiegano le condizioni di corretto utilizzo e di lavaggio
Dispositivo ad uso individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Dopo l'utilizzo, non disperdere nell'ambiente e smaltire in conformità alla legge vigente per i rifiuti potenzialmente infetti

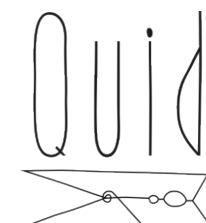


Trattamenti tessuto

TRATTAMENTO ANTIMICROBICO

- TECNOLOGIA NON MIGRANTE. NESSUNA MIGRAZIONE DI SOSTANZE VERSO LA PELLE E NE VERSO L'AMBIENTE
- TECNOLOGIA AD AMPIO SPETTRO DI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEI MICROORGANISMI
- TRATTAMENTO SOLIDO ALLE MANUTENZIONI E STABILE NEL TEMPO
- FRESCHEZZA : PREVIENE LA FORMAZIONE DI ODORI
- NON CONTENGONO LE SOSTANZE PRESENTI NELL'ELENCO SVHC CANDIDATE LIST OF ECHA

TRATTAMENTO ANTIGOCCIA

Il trattamento garantisce l'idrorepellenza del tessuto su entrambi i lati limitando il passaggio di gocce e di salivazione dall'utente all'ambiente e viceversa

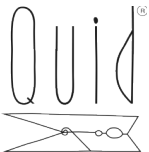


Etichetta e Confezione

Ogni mascherina è inserita in una **polybag singola**.
100 mascherine sono inserite in polybag grande.

In alternativa, **50 mascherine sfuse in una scatola di cartone**

Un cartone contiene 1.500 pz.

Ogni mascherina è accompagnata da **un flyer** che spiega le condizioni di corretto utilizzo. (vedi pagina seguente)

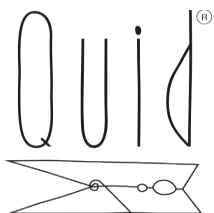

CODICE EAN A 13 NUMERI

Mascherina in tessuto di cotone ed elastan

REF MOD. PMS702 Confezione pz. 1

Mascherina ad uso medico a 1 strato, Tipo I, in Tessuto cotone, con elastici, lavabile, non sterile, conforme a UNI EN 14683



COOPERATIVA SOCIALE
QUID Via della Consortia 4,
Verona

Made in Italy



XX.XXXX



XXXX



XX.XXXX

97% COTONE / COTTON
3% ELASTAN



INDICAZIONE DI LAVAGGIO E
ASCIUGATURA

Dispositivo riutilizzabile fino a 15 volte a seguito di lavaggio per immersione in soluzione di 1 litro di acqua con 5 grammi di ipoclorito di sodio (es. candeggina), sciacquare sotto acqua corrente, quindi lasciare asciugare completamente all'aria, per poi stirare a massima temperatura su ambo i lati il prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Indicazioni di corretto utilizzo

ISTRUZIONI PER L'USO. MASCHERINA FACCIALE AD USO MEDICO

DESCRIZIONE

Mascherina facciale ad uso medico a 1 strato in cotone ed elastan coprente naso e bocca, elastici, non sterile, per uso multiplo. Latex free.

INDICAZIONI D'USO

Mascherina facciale ad uso medico: dispositivo che copre bocca e naso (figura B) per fornire una barriera e ridurre al minimo la trasmissione diretta di agenti infettivi.

Prodotto conforma a UNI EN 14683, tipo I.

Il prodotto non è sterile.

COMPOSIZIONE: 97% Cotone 3%Elastan

Codice: PMS702.

Lot. XXXX

Data di produzione: X.XXXX

Data di scadenza: X.XXXX

AVVERTENZE

Dispositivo ad uso individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contaminazione, occorre sostituire la mascherina o seguire le indicazioni di lavaggio.

Conservare in luogo asciutto.

Figura A

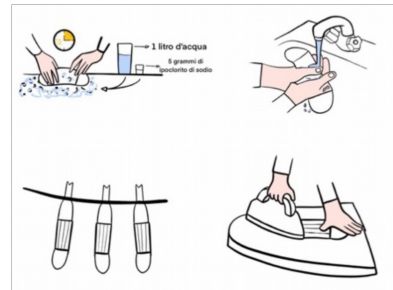


Figura B



Le mascherine che rientrano nel Tipo I sono maschere facciali ad uso medico che dovrebbero essere utilizzate solo da pazienti e da altro personale per ridurre il rischio di diffusione dell'infezione in caso di epidemia e pandemia. Non sono destinate ad essere utilizzate da professionisti sanitari in sala operatoria o in ambienti con requisiti assimilabili

Informazioni Commerciali

Contatti:

Email: sartoria@coopnoncello.it

Mob.: +39 346 663 8404